


Schema transdukčního pokusu

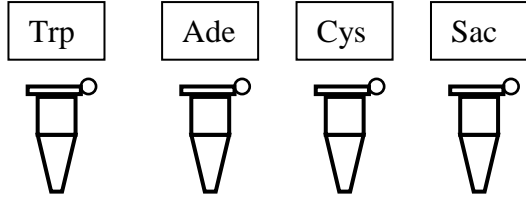

Recipient K1 +K9
PBS1 lysát (L42,cat)

Top agar, 45°C

Selekční LB
misky s cat

15 minut, pak přidat do
top agaru

Ihned

12-24
hodin
37°C

Narostlé
matrice 12-24 hod
37°C

Inokulace
matrice s
LB cat

Transduktanty

Replikování matric na selekční misky (s přídavky) pro stanovení frekvence kotransdukce neselektovaných kotransdukovaných znaků. Možno též přeočkovat sterilními párátky.

